



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CARRO MACA HIDRÁULICO
DORSO MÓVEL / ELEVAR/BAIXAR
LEITO E CARENAGENS EM FIBERGLASS**



Posicionamentos do Leito



Dorso



Elevar



Baixar

DESCRIÇÃO: Maca hospitalar avançada, com altura regulável por sistema hidráulico a pedal, leito confeccionado em fiberglass com cabeceira regulável por sistema pneumático; apresenta par de grades de proteção laterais, sistema sanfonado / empilhável, confeccionadas em aço inoxidável, que apresentam travamento no final do curso e desarme, trabalhando com grande segurança, além de proporcionar ao operador fácil manuseio. O conjunto com estrutura e base tubular é dotado de rodízios giratórios de 5" com travamento total, e direcional e apresenta carenagem protetora de sua base em fiberglass.

ESTRUTURA: suas estruturas são confeccionadas em aço utilizando tubos quadrados de 30 x 30 x 1,5mm que são posicionados sob o leito garantindo sua resistência e tubos retangulares 30 x 50 x 1,5mm de na sua base.

LEITO E CARENAGEM PROTETORA DA BASE: seu leito em 02 segmentos é confeccionado em fiberglass, e apresenta extrema durabilidade, além de proporcionar fácil higienização, e não manchar, sua base é protegida por carenagem em fiberglass, e apresenta ainda puxadores incorporados.

SISTEMA ANTI-IMPACTOS: apresenta também sistema anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco tipo bumper, localizados nas 04 extremidades do leito.

MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; e elevação da cabeceira por sistema pneumático através de gatilho pneumático.



ACESSE: www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS DO LEITO: são confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, utilizando tubos de 3/4" e 5/8" x 1, 2mm, sistema sanfonado / empilhável as quais são práticas, de fácil manuseio e duráveis, além de seguras, possuem travamento na elevação e desarme.

RODÍZIOS: equipamento fornecido com rodízios de 5" com freios de travamento totais e sistema direcional em duas rodas para garantir melhor dirigibilidade e ergonomia, com banda de rodagem dupla e faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador.

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; e as partes de aço inoxidável AISI 304.

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:


01 colchonete hospitalar em espuma D-33 espessura 80 mm, revestimento em courovin, (dotado de zíper o qual permite a higienização total do conjunto).

01 suporte de soro 02 ganchos, acoplável nas quatro extremidades do leito.


01 SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS:

SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS

ACIONAR

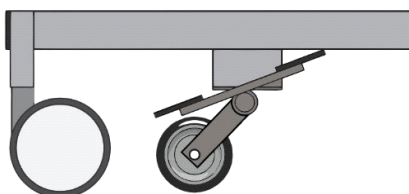

SUSPENDER

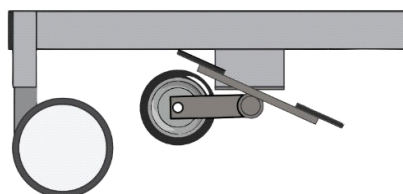

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPOTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO



AOP-MR-014

CILINDRO DE OXIGÊNIO 03 LITROS



AOP-MR-015

SUPOTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL



AOP-SS-004

KIT PARA OXIGENOTERAPIA



AOP-MR-031

PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MONITOR



AOP-MR-013

DIMENSÕES ÚTEIS DO LEITO: C:1, 90 m x L: 0, 61 m **DIMENSÕES TOTAIS DO LEITO:** C: 2, 09 m x L: 0, 76 m.
ALTURA MÍNIMA(PISO AO LEITO):0, 60m+Colchão **ALTURA MÁXIMA (DO PISO AO LEITO):** 0, 87 m

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,95m X C=2,30m **PESO:** 200kg

MODELO: BKMR 005 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620002

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br | **WhatsApp:** (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CARRO MACA HIDRÁULICO
DORSAL / PERNAS / ELEVAR/BAIXAR / TRENDELENBURG / REVERSO
LEITO EM PEAD E CARENAGENS EM FIBERGLASS**



DESCRIÇÃO: maca hospitalar avançada, com altura regulável por sistema hidráulico a pedal, leito com 03 segmentos confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade) que proporciona os seguintes movimentos do leito através de sistema pneumático: elevação do apoio dorsal e apoio de pernas, TRENDELENBURG e reverso. A elevação do leito é proporcionada por sistema hidráulico o qual é acionado por meio de pedal. O conjunto é montado sobre quadro com travessas estruturadas em aço tubular quadrado, a base é confeccionada em tubos 30x50mm x 1,5mm e 3mm de espessura de parede. A maca hidráulica apresenta grades de proteção laterais em aço inoxidável, que proporcionam segurança ao paciente, e fácil acionamento ao operador. sua base tubular é dotada de rodízios giratórios de 5", com freios diagonais, apresentando carenagem protetora da base confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico.

ESTRUTURA TUBULAR , LEITO E BASE: quadro do leito e estruturas confeccionadas em aço tubular quadrados de 30 x 30 x 1,5mm; e base com tubos retangulares 30 x 50 x 1, 5mm e 3mm, recebendo proteção por carenagem em fiberglass.

LEITO: o leito com 03 segmentos é confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 12 mm que apresenta extrema durabilidade, e resistência além de proporcionar fácil higienização.



ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072




A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



SISTEMA ANTI IMPACTOS: apresenta sistema anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível;
MOVIMENTOS DO LEITO: proporciona os seguintes movimentos do leito através de sistema pneumático: elevação do apoio dorsal (50°) elevação do apoio de pernas (30°), TRENDELENBURG (18°) e reverso (13°), sentado. A elevação do leito é proporcionada por sistema hidráulico o qual é acionado por meio de pedal.

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS DO LEITO: confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, utilizando tubos de 3/4" e 5/8" x 1, 2mm, sistema sanfonado empilhável, as quais são práticas de fácil manuseio e duráveis, possuindo travamento na elevação e desarme.

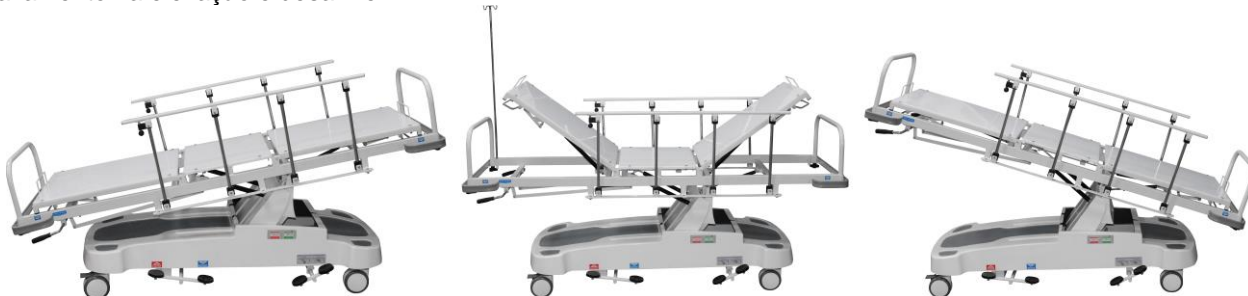

RODÍZIOS: este equipamento é fornecido com rodízios com diâmetro de 5" com sistema de freios em diagonal, com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; e as partes de aço inoxidável AISI 304, recebem acabamento polido.

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:


01 colchonete hospitalar em espuma D-33 espessura 80 mm, revestimento em courovin, (dotado de zíper o qual permite a higienização total do conjunto).

01 suporte de soro 02 ganchos, acoplável nas quatro extremidades do leito.


01 SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS:

SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS

ACIONAR

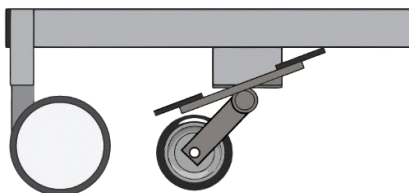

SUSPENDER

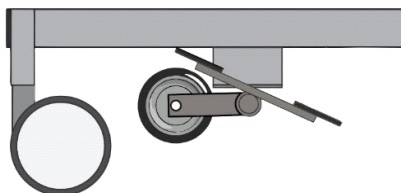

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPOTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO



AOP-MR-014

CILINDRO DE OXIGÊNIO 03 LITROS



AOP-MR-015

SUPOTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL



AOP-SS-004

KIT PARA OXIGENOTERAPIA



AOP-MR-031

PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MONITOR



AOP-MR-013

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 810 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

ALTURA MÍNIMA(PISO AO LEITO):0, 55m+Colchão 80mm

ALTURA MÁXIMA (DO PISO AO LEITO): 0, 75 m +Colchão 80mm / **CAPACIDADE:** 180 kg.

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,95m X C=2,30m **PESO:** 200kg

MODELO: BKMR 009 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620002

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CARRO MACA HIDRÁULICO
FOWLER/SEMI-FOWLER / TRENDELENBURG/REVERSO / ELEVAR/BAIXAR
LEITO EM PEAD E CARENAGENS EM FIBERGLASS**



DESCRIÇÃO: maca hospitalar avançada, com altura regulável por sistema hidráulico a pedal, leito com 04 segmentos confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade) que proporciona os movimentos do leito através de sistema pneumático e sistema hidráulico acionado por pedal. O conjunto é montado sobre quadro com travessas estruturadas em aço tubular quadrado, a base é confeccionada em tubos 30x50mm x 1,5mm e 3mm de espessura de parede. A maca hidráulica apresenta grades de proteção laterais em aço inoxidável, que proporcionam segurança ao paciente, e fácil acionamento ao operador. sua base tubular é dotada de rodízios giratórios de 5", com freios diagonais, apresentando carenagem protetora da base confeccionada em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico.

MOVIMENTOS DO LEITO: proporciona os seguintes movimentos do leito através de sistema pneumático: fowler, semi fowler, elevação do apoio dorsal (50°) e apoio de pernas, flexão de joelhos (30°), trendelemburg (18°) e reverso (13°), sentado. A elevação do leito é proporcionada por sistema hidráulico o qual é acionado por meio de pedal.



ESTRUTURA TUBULARES , LEITO E BASE: quadro do leito e estruturas confeccionadas em aço tubular quadrados de 30 x 30 x 1,5mm; e base com tubos retangulares 30 x 50 x 1, 5mm e 3mm, recebendo proteção por carenagem em fiberglass.

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

@ bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



LEITO: o leito com 04 segmentos é confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 12 mm que apresenta extrema durabilidade, e resistência além de proporcionar fácil higienização.

SISTEMA ANTI IMPACTOS: apresenta sistema anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível;

GRADES DE PROTEÇÃO LATERAIS DO LEITO: confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, utilizando tubos de 3/4" e 5/8" x 1, 2mm, sistema sanfonado empilhável, as quais são práticas de fácil manuseio e duráveis, possuindo travamento na elevação e desarme.



RODÍZIOS: este equipamento é fornecido com rodízios com diâmetro de 5" com sistema de freios em diagonal, com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; e as partes de aço inoxidável AISI 304, recebem acabamento polido.

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:


01 colchonete hospitalar em espuma D-33 espessura 80 mm, revestimento em courvim, (dotado de zíper o qual permite a higienização total do conjunto).

01 suporte de soro 02 ganchos, acoplável nas quatro extremidades do leito.


01 SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS:

SISTEMA DE 5ª RODA PARA FUNÇÃO DIRECIONAL E MANOBRAS

ACIONAR

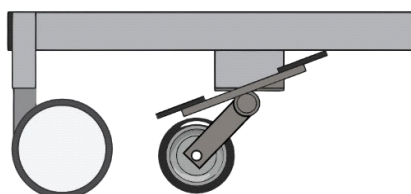

SUSPENDER

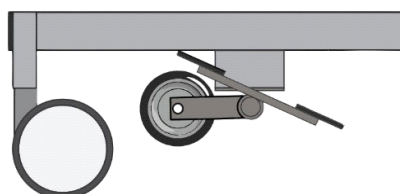

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

SUPOTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO



AOP-MR-014

CILINDRO DE OXIGÊNIO 03 LITROS



AOP-MR-015

SUPOTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL



AOP-SS-004

KIT PARA OXIGENOTERAPIA



AOP-MR-031

PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA MONITOR



AOP-MR-013

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 810 mm x Comprimento: 2.020 mm x Altura: 900 mm

ALTURA MÍNIMA(PISO AO LEITO):0, 60m+Colchão

ALTURA MÁXIMA (DO PISO AO LEITO): 0, 87 m / **CAPACIDADE:** 180 kg.

EMBALAGEM: A=1,05m X L=0,95m X C=2,30m **PESO:** 200kg

MODELO: BKMR 010 | **MARCA** BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620002

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



**CARRO MACA HIDRÁULICO
CABECEIRA REGULÁVEL / ELEVAR/BAIXAR
LEITO ESTOFADO E GRADES EM AÇO INOXIDÁVEL**



ESTRUTURA: tubular aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm com acabamento em pintura eletrostática a pó;
LEITO: estofado com revestimento em courvin, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço carbono 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede;

CABECEIRA REGULÁVEL (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

MOVIMENTOS DO LEITO: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1", montado em perfil de aço carbono 1.020 dobrado em "U", 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido.



FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:

- **01 par de grades laterais:** sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede;
- **01 suporte de soro:** em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito;

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 180 kg.

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 670 mm x Comprimento: 2.100 mm

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm

ALTURA MÍNIMA: 600 mm - **ALTURA MÁXIMA:** 870 mm

EMBALAGEM: A=0,85m X L=0,85m X C=2,30m **PESO:** 100kg

MODELO: BKMR 006 | **MARCA BK** ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | **REGISTRO ANVISA:** 80825620002

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50

RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072