




A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

CAMA ELÉTRICA DUPLO COMANDO ACOPLADOS NAS GRADES SUPERIORES E PESEIRA + CPR + BLOQUEADOR

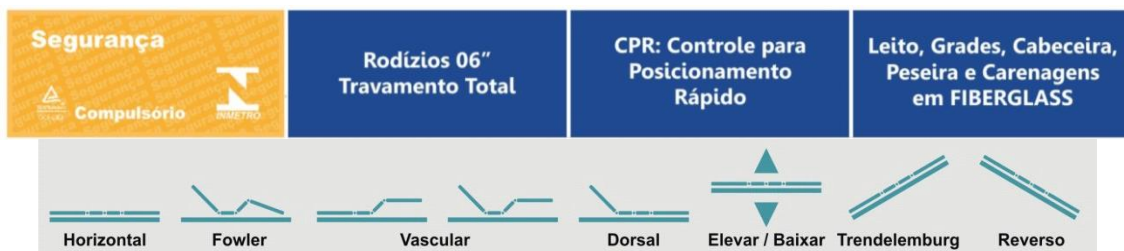

As **Camas Elétricas BKCF 023** foram desenvolvidas para dar suporte, traslado, conforto e segurança aos pacientes em hospitais, nos mais diversos tipos de ambientes como: enfermarias, unidades de terapia intensiva, recuperação pós-anestésica, entre outros.

MOVIMENTOS DO LEITO: Apoio dorsal, flexão pernas (joelhos), cardíaco, fowler e semi-fowler, sentado, elevar / baixar do leito, trendelenburg e reverso de trendelenburg, e vascular. acionados por sistema elétrico composto de atuadores lineares, acionados por meio de controles internos e externos nas grades laterais (paciente) e peseira (operador), podendo ser habilitados ou inabilitados pelo operador para utilização do paciente por meio do supervisor localizado na peseira da cama. O movimento vascular é proporcionado com a elevação do apoio de pernas por sistema de cremalheiras para procedimentos vasculares;

• **FOWLER:** posição semi-sentada com região do tronco flexionada em ângulo de 45°. Indicada para pacientes com dispneia (falta de ar), pneumonia, drenagem, recuperação pós-cirúrgica, entre outras;

• **SEMI-FOWLER:** possibilita que o apoio dorsal seja posicionado em um ângulo de até 30°; finalidade: reduzir a falta de ar, drenagem do pulmão; na recuperação de cirurgias abdominais; prevenção da aspiração de líquidos e secreção; pacientes com nível de consciência reduzidos;

• **TRENDELEBURG:** posição onde os membros inferiores ficam mais elevados em relação à cabeça do paciente. Indicada para facilitar o acesso à região pélvica, auxiliar no preenchimento e distensão para facilitar o processo de inserção de cateteres centrais e periféricos, auxiliar no processo de perfusão, estado de choque, drenagem de secreção pulmonar, entre outras;

• **REVERSO DE TRENDELEBURG:** posição inversa ao Trendelenburg tradicional, onde a cabeça e o tronco do paciente ficam mais elevados em relação aos membros inferiores. Indicada para melhorar a circulação dos membros inferiores, tratar embolismo aéreo venoso, melhorar a circulação da região cerebral, prevenir broncoaspiração de vômitos e ingurgitar vasos do cervix para colocação de cateteres venosos centrais, facilitar a respiração em pacientes com sobrepeso e obesos, entre outras;

• **POSIÇÃO VASCULAR:** quando no seu acionamento o apoio de pernas permite que os membros inferiores fiquem em uma posição mais alta em relação ao tronco, com uma leve flexão das pernas; finalidade: melhorar a circulação nos membros inferiores com conseqüente diminuição de edema e prevenção de feridas (escaras). Indicada também para alívio da dor, melhoraria da circulação dos membros inferiores, entre outras;



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072



A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

• **POSIÇÃO SENTADO:** Também chamado de **CADEIRA CARDÍACA**, similar com a posição "Fowler" na região dorsal, porém, com angulação negativa da sessão das pernas em relação à seção do assento e do dorso. Indicada para a recuperação de pacientes cardíacos e com problemas respiratórios, alívio dos pulmões e melhoria do sistema circulatório, melhoria metabólica em pacientes obesos com suporte ventilatório, entre outras.

• **POSIÇÃO ELEVAR / BAIXAR:** os movimentos do leito de elevar e baixar totalmente são acionados por meio dos controles localizados nas GRADES SUPERIORES, como também pelo PAINEL SUPERVISOR, localizado na peseira da cama. O PAINEL SUPERVISOR pode habilitar ou inabilitar a atuação dos controles localizados nas grades laterais mediante determinação da equipe médica e enfermagem.

CONFECÇÃO: estrutura confeccionada em aço retangular 1.020 recuado 50 x 30 x 1,5 mm de espessura de parede; **estrutura totalmente revestida por carenagens e FIBERGLASS de alta resistência e durabilidade, ou seja: 02 pares de grades laterais, leito 4 segmentos, cabeceira e peseira confeccionadas totalmente em FIBERGLASS com acabamento em gel coat isoftálico.** A fibra de vidro, FIBERGLASS, é material radiotransparente, de longa vida útil e superior a outros tipos de polímeros. Em sua higienização, é resistente aos mais diversos tipos de sabões e detergentes. O leito apresenta protetor anti-impactos nas extremidades confeccionado em PVC flexível branco;

CABECEIRA PESEIRA: a cabeceira e peseira confeccionadas em FIBERGLASS são duráveis não mancham e não perdem a cor original, com tubos de encaixe ao quadro de longarinas confeccionado em aço inoxidável AISI 304, 1" x 1,2 mm de parede, as quais são facilmente removíveis e de fácil higienização;

PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: apresenta 04 pontos localizados nas extremidades do leito para posicionamento do suporte de soro;

ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa;

ACIONAMENTO:

Movimentos do leito proporcionados por meio de atuadores lineares, acionados através de controle acoplado nas grades laterais superiores e peseira;

SISTEMA BLOQUEADOR:

Possui sistema bloqueador dos movimentos para habilitar ou inabilitar o acionamento dos movimentos pelo paciente;

CPR RETORNO DE POSIÇÃO (RESSUSCITAÇÃO):

Proporciona retorno imediato a posição trendelemburg para casos de emergência e ressuscitação, e também totalmente horizontal / baixada para melhor acesso ao paciente;

RODÍZIOS:

Conjunto de 04 rodízios 05", com sistema de travamento total e função direcional quando em movimento. Acionados por mecanismo em aço inoxidável.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

01 Colchão hospitalar D-33, espessura 12 cm, com revestimento em courvin, sem costuras;

01 Travesseiro hospitalar

01 Suporte de soro em aço inoxidável, acoplável nas quatro extremidades do leito

DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 900 mm x Comprimento: 1.980 mm x Altura do piso ao leito: 650 mm

DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 1.060 mm x Comprimento: 2.120 mm

MODELO: BKCF 023

MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

REGISTRO ANVISA: 80825620012



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072