




A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

CARRO MACA - DORSO MÓVEL / ELEVAÇÃO HIDRÁULICA A PEDAL LEITO E CARENAGENS EM FIBERGLASS

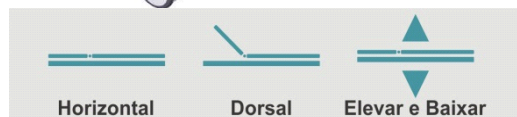

ESTRUTURA: tubular de aço carbono 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm, sobreposta por carenagem em fiberglass acabamento em gel coat (alta resistência e durabilidade), possibilita fácil higienização do conjunto;

LEITO: confeccionado em fiberglass acabamento em gel coat isoftálico;

MOVIMENTOS: proporciona os movimentos de elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal e também do apoio dorsal, ajustável por sistema pneumático com acionador manual em aço inoxidável;

RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador;

FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: **01 par de grades laterais:** confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, sistema sanfonado (empilhável) composta tubo oblongo aço inoxidável, 16 mm x 30 mm x 1,2 mm espessura de parede e tubo redondo de aço inoxidável 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede, dotada de sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por acionamento de puxador; **01 suporte de soro:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m; **01 colchonete:** confeccionado espuma densidade 33, espessura 80 mm com revestimento em courvim de alta qualidade;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS: suporte para cilindro de oxigênio, suporte para monitor. **PESO ADMISSÍVEL:** 180 kg.

DIMENSÕES: Úteis do Leito: C: 1,90 m x L: 0,61 m / **Dimensões Totais do Leito:** C: 2,09 m x L: 0,76 m.
Altura mínima (do piso ao leito): 0,58 m + Colchão (8 cm). / **Altura máxima (do piso ao leito):** 0,83 m + Colchão (8 cm).

MODELO: BKMR 005
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825620002



www.bkhospitalar.com.br



bkcomercial@bkhospitalar.com.br



55 (41) 3282-0072